

ESPÉCULO AURICULAR DESCARTÁVEL




1. Descrição

Utilizado acoplado ao otoscópios. Para exames no ouvido interno ou externo visando detectar anormalidades no tímpano e canal auditivo.

2. Especificação Técnica

- Apresentação:- Dimensões:-

- ESPECULO AURICULAR DESCARTÁVEL GOODDOCTOR - 2,5 MM – REF:- GD000004;
- ESPECULO AURICULAR DESCARTÁVEL GOODDOCTOR - 4,0 MM – REF:- GD000005.

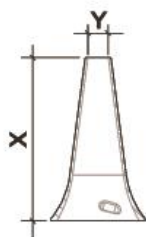

DIMENSÕES		
ESPÉCULO	X	Y
GD000004	35.88 mm	2.5 mm
GD000005	30.50 mm	4.0 mm

- Composição:- Poliestireno de Alto Impacto;
- Embalagem:- contém 40(quarenta) unidades, acondicionada em embalagem primária plástica (PE), caixa contendo 800(oitocentas)unidades.

3. Característica

- Compatibilidade a otoscópios:- Heine, MD, Missouri, Riester. Welch Allyn,
- Cor cinza escuro;
- Não estéril;

4. Instrução de uso

- Empurre o espéculo auricular para a cabeça do instrumento (Otoscópios), com movimento rotativo para que a projeção no interior do espéculo se encaixe na ranhura e rode no sentido horário, até que fique fixo;
- Manusear os espéculos, deve ser feito por pessoas qualificadas;
- **Uso único;**
- **Descartar após o uso.**

ESPÉCULO AURICULAR DESCARTÁVEL

5. Armazenamento e conservação

- Manter em temperatura ambiente, em local limpo, seco, arejado, fora de umidade e não expor a luz solar direta;
- Não colocar nenhum objeto pesado sobre o produto ou sua embalagem;
- Deve-se manusear o produto cuidadosamente para evitar danos e alterações de suas características. Evitando batidas e quedas bruscas;
- Manter a embalagem original e fechada;
- Não utilizar o produto, quando a embalagem apresentar sinais de violação;
- Deve ser transportado em local limpo e seco, de modo a evitar danos à embalagem. O mesmo não pode ser transportado com produtos e resíduos químicos que possam desprender vapores corrosivos.

6. Validade

- Validade: 10 anos.
- Registro ANVISA: 82599819001.

Fabricado por:-GOODDOCTOR EXCELENCIA EM SAUDE LTDA.

CNPJ:-44.913.571/0001-92. I.E.: -636.482.631.115.

AFE: 8.25998-1 Responsável Técnico:- Clélia D. X. CRUZ -COREN/SP 312.164

SAC:- sac@gooddoctor.ind.br

Distribuído por:- Cirurgica Bonaparte

Fone: (11) 4233.3434

WhatsApp: 11) 9.3718.1020

E-mail:- vendas@cirurgicabonaparte.com.br